

## mac OS11 で医見書を利用するための設定方法

### 【作業手順】

- (1) 医見書ソフトのインストール
- (2) 医見書ソフトを最新バージョンにするためバージョンアップをおこなう  
(オフラインバージョンアップ)
- (3) Firebird2.0 をアンインストールし、Firebird2.5 をインストール
- (4) macOS11 専用ツールを使用し設定作業をおこなう

### 【操作方法】

#### (1) 医見書ソフトのインストール

医見書ソフトのインストールをおこないます。

#### (2) 医見書ソフトの最新バージョンアップをおこなう(オフラインバージョンアップ)

下記 URL よりバージョンアップ用のプログラムをダウンロードし、インストールをおこないます。

◆医見書: アップデート (最新版へのバージョンアップ)

<https://www.orca.med.or.jp/ikensyo/update.html>

※

アクセスしていただくと、アップデート(最新版へのバージョンアップ)画面が表示されます。


「オフラインで適用」をクリックし、オフライン用アップデートから「Mac OSX 用アップデートパッケージ」をダウンロードし、インストールをおこなってください。

#### (3) Firebird2.0 をアンインストールし、Firebird2.5 をインストール

Firebird2.5 のインストーラと専用ツールをあらかじめダウンロードしてください。

##### ◇Firebird2.0 のアンインストール

Firebird2.0 の削除をおこなうため、以下の操作をおこないます。

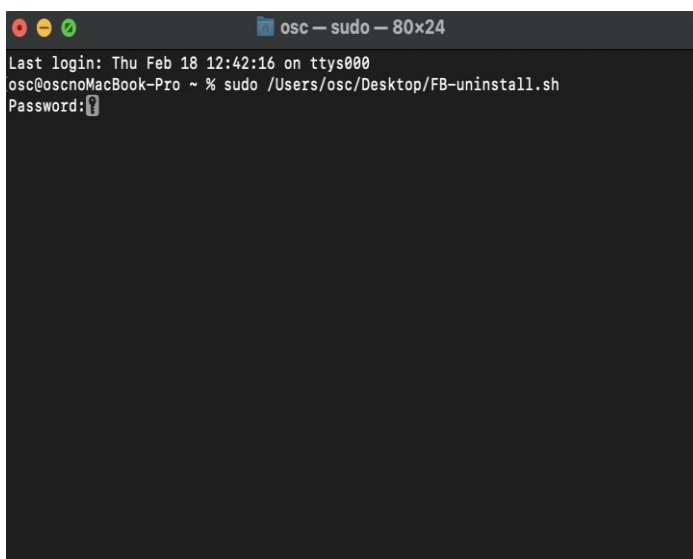

1.  
[FB-uninstall.sh]をデスクトップ上に配置します。
2.  
Firebird のアンインストールをおこないます。  
[Macintosh HD]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ターミナル]を起動させます。
3.  
「sudo bash」(sudo と bash の間にスペースを入れます)と入力後、スペースを 1 回押下します。


上記の入力が完了後、デスクトップにあります[FB-uninstall.sh]をターミナルにドラックし、リターンを押下してください。

```
osc -- -zsh -- 80x24
Last login: Thu Feb 18 12:42:16 on ttys000
osc@oscnMacBook-Pro ~ % sudo /Users/osc/Desktop/FB-uninstall.sh
Password:
Firebird-Uninstall-Start
Clean User
Clean Group
Remove PlistFile
Remove Launchd
Remove Framework
Remove Receipt
Firebird-Uninstall-Finished
osc@oscnMacBook-Pro ~ %
```


4.  
画面上に[Password:]と表示されますので、使用されている Macintosh のパスワードを入力後、再度リターンを押下してください。  
(パスワードの入力は文字が表示されませんのでご注意ください)
5.  
左記画面のように最後「Finished」と表示されたら Firebird2.0 のアンインストールが完了です。

Firebird2.0 のアンインストールが完了しましたら、Firebird2.5 のインストール作業をおこないます。


### ◇Firebird2.5 のインストール

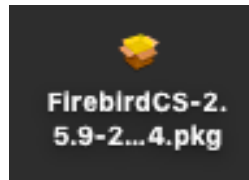


※  
事前にダウンロードしていただいた左記ファイルがデスクトップにあるかご確認ください。

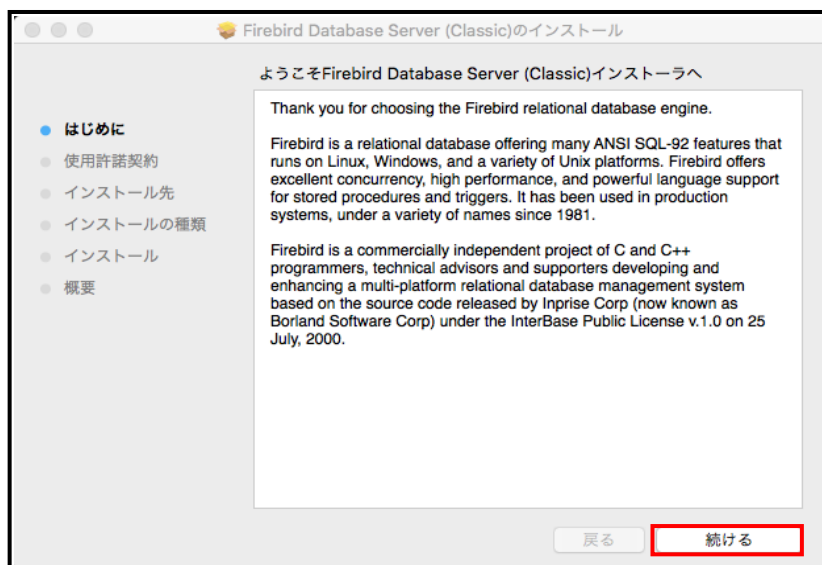

1.  
[FirebirdCS-2.5.9-27139-x86\_64.pkg]をダブルクリックするとインストーラが表示されますので[続ける]をクリックしてください。

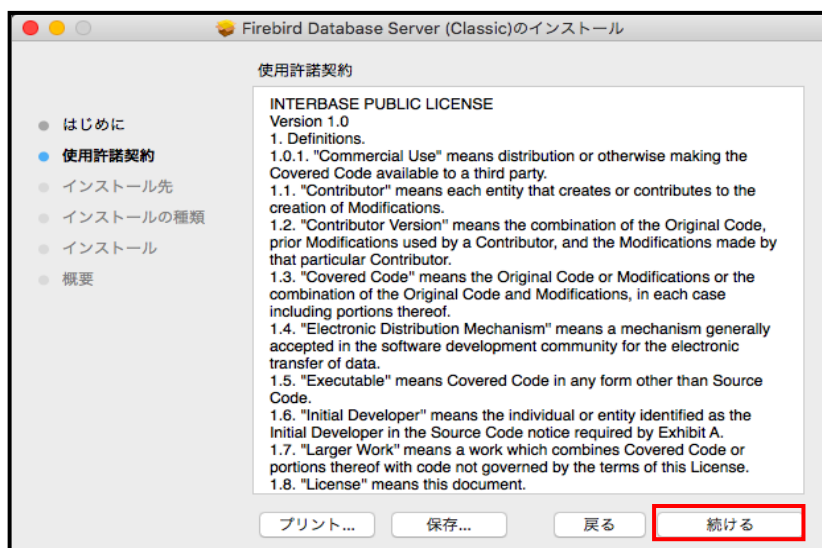


2.  
使用許諾契約画面が表示されるので、[続ける]をクリックしてください。

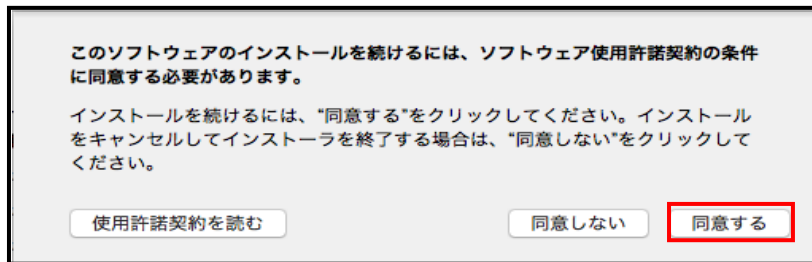

3.  
同意画面が表示されましたら、[同意する]をクリックしてください。




4.  
インストール先の選択画面が表示される場合は、[続ける]をクリックしてください。

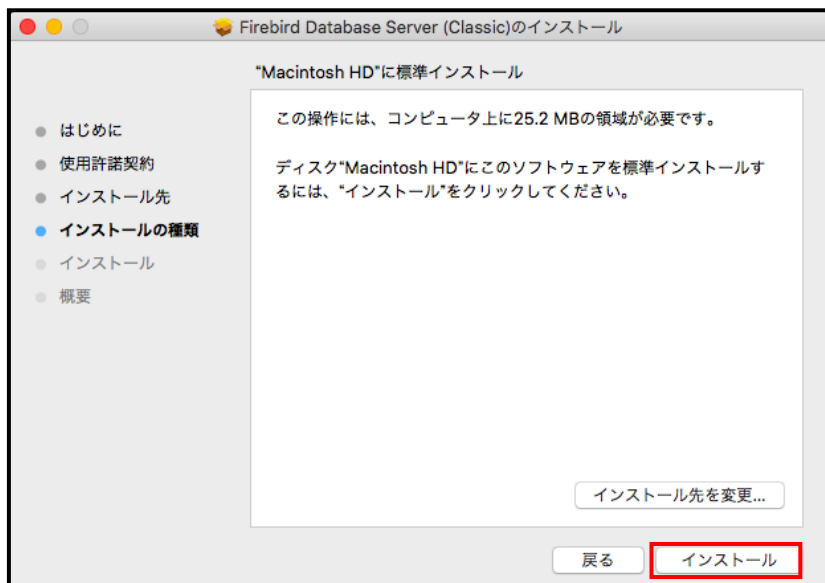

5.  
インストール画面が表示されるので、[インストール]をクリックしてください。



6.  
パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力してください。

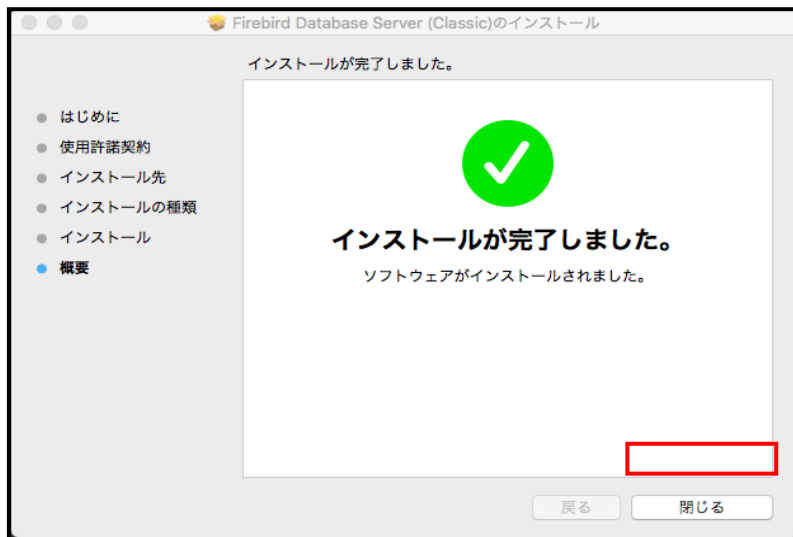


7.  
インストールが始まります。完了したら、  
[閉じる]をクリックしてください。

インストールが完了したら。PC を再起動  
してください。

#### (4) macOS11 専用ツールを使用し設定作業をおこなう




※  
事前にダウンロードしていただいた左記  
ファイルがデスクトップにあるかご確認ください

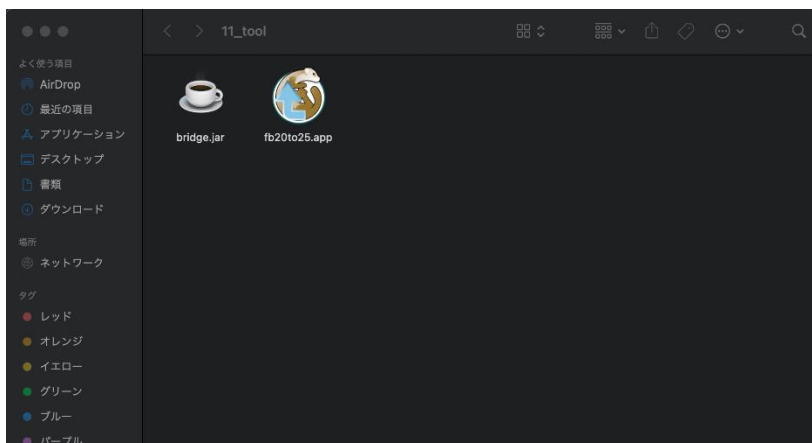


1.  
[11\_tool.zip]をダブルクリックしてください。

フォルダ内に[bridge.jar]と[fb20to25.app]が  
あるのでご確認ください。

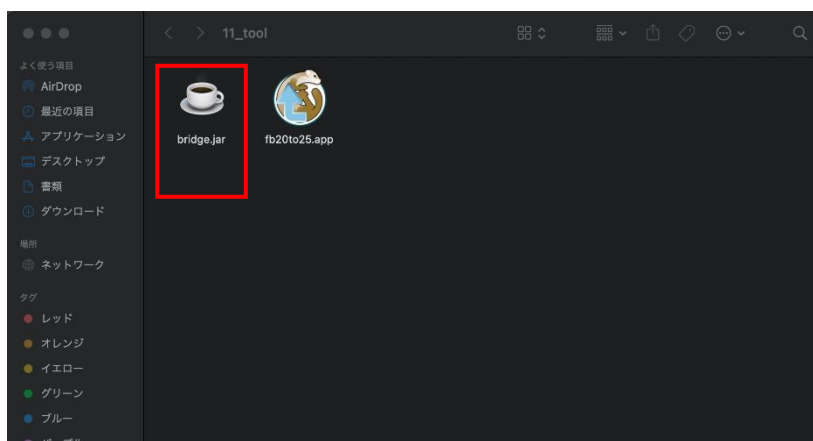

[lib]フォルダに移動します。

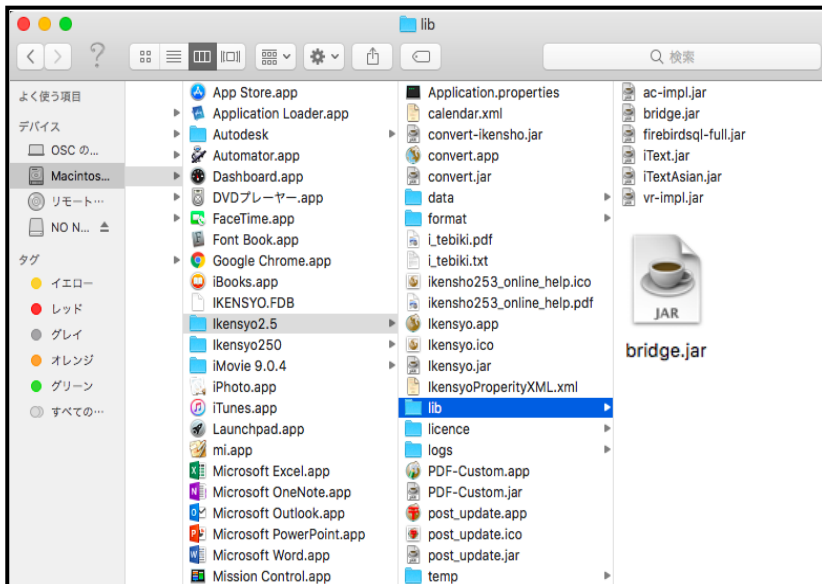

2.

確認できましたら、[HD]→[アプリケーション]  
→[ikensyo2.5]→[lib]フォルダを開きます。

解凍した[11\_tool]フォルダ内にある  
[bridge.jar]を[lib]内に移動してください。


[置き換えますか?]とメッセージが表示さ  
れたら、[置き換える]を選択してください。




3.

次に [HD] → [アプリケーション] -  
[ikensyo2.5]フォルダを開いてください。

[ikensyo2.5]フォルダ内に[11\_tool]にある  
[fb20to25.app]を移動してください。

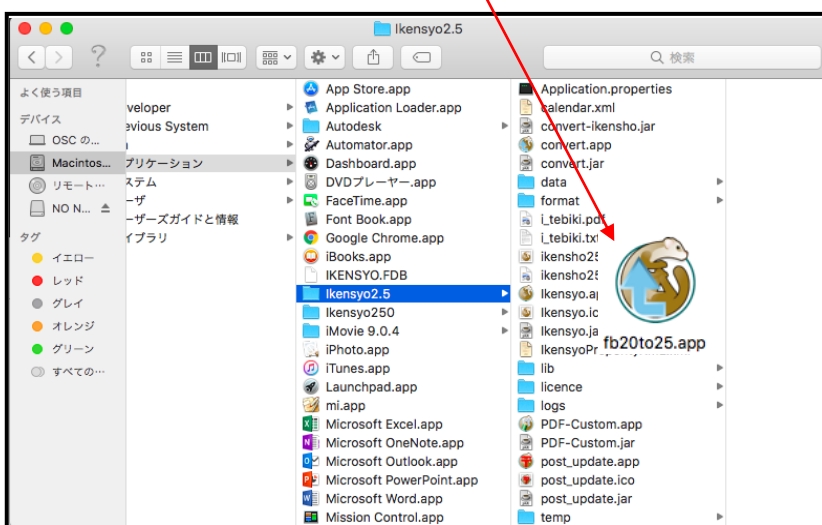

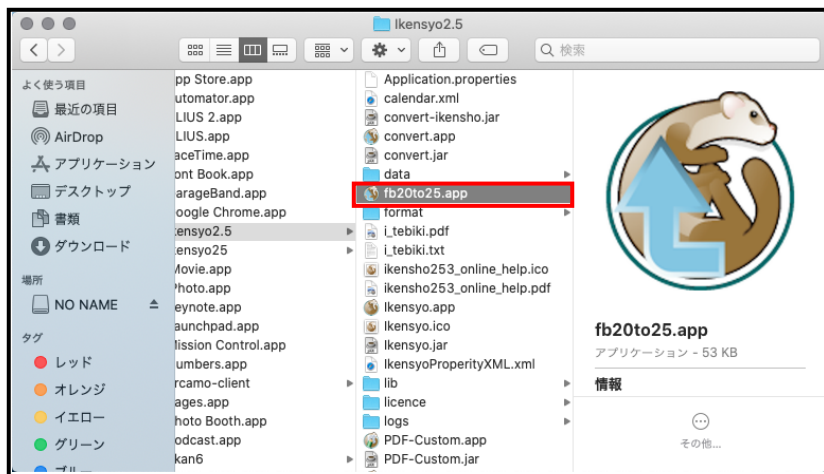


4.

[fb20to25.app]をキーボードの「control」キー押しながら「開く」をクリックしてください。




5.

左図メッセージが表示されましたら「キャンセル」をクリックします。

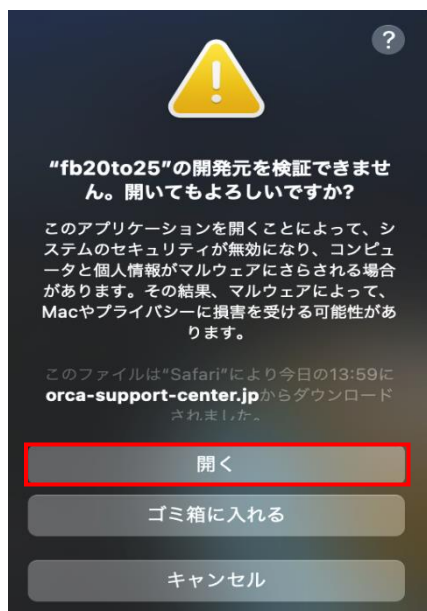


6.

再度[fb20to25.app]をキーボードの「control」キー押しながら「開く」をクリックしてください。左図のメッセージが表示されましたら「開く」をクリックします。

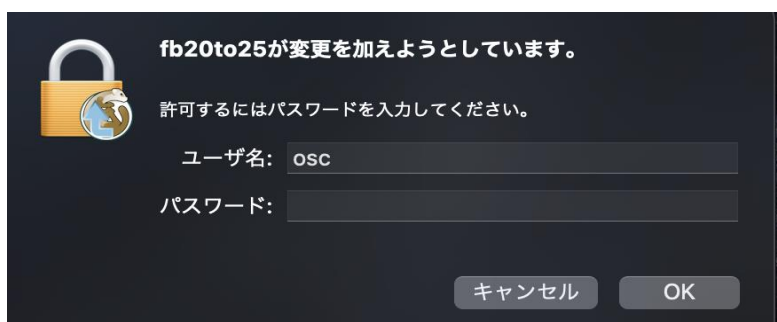

6.

パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力してください。

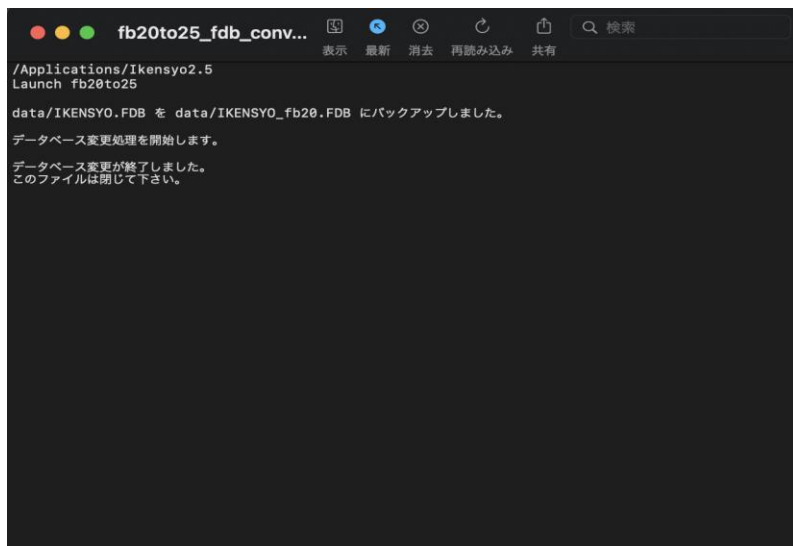

7.

[fb20to25.app]を実行時に左記画面が表示  
されましたら、DBの変換が終了したので、画  
面を閉じていただき、医見書の動作確認を  
おこなってください。

作業は以上となります。